

ČEŠTINA



CS: Nejdříve si prostudujte bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Za použití technologie IPL (intenzivní pulzní světlo) epilátor Homelight® od BaByliss dlouhodobě eliminuje nežádoucí chloupky naprosto bezpečně v soukromí a pohodlí vašeho domova.

Homelight® se používá k ošetření těla (hlavně nohou, rukou a zad), dále citlivých oblastí (podpaží a třísel) a obličeje (tváří, rtů a brady) díky speciální lampě na obličej.

Epilátor Homelight® je určen mužům a ženám nad 18 let.

Před prvním použitím Homelight® si pečlivě přečtete celý návod k použití.

Doporučujeme nahlížet do tohoto manuálu před každým použitím Homelight®.



Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	4
2. Provoz přístroje Homelight®	11
2.1. Technologie IPL	
2.2. Fáze růstu chloupku	
2.3. Skin Sensor System - automatická detekce úrovně intenzity	
2.4. Plánování ošetření přístrojem Homelight®	
2.5. Délka jednoho ošetření přístrojem Homelight®	
2.6. Očekávané výsledky epilace pomocí přístroje Homelight®	
2.7. Zařízení k ochraně očí	
2.8. Popis přístroje Homelight®	
3. Použití přístroje Homelight®	17
3.1. Příprava pokožky	
3.2. Provedení testu s přístrojem Homelight®	
3.3. Ošetření přístrojem Homelight®	
3.4. Funkce: přesný režim a režim skluzu	
3.5. Pokrytí oblasti aplikace	
3.6. Epilace obličeje	
4. Po použití přístroje Homelight®	25
4.1. Vypnout přístroj Homelight®	
4.2. Čištění	
4.3. Péče o pokožku po epilaci přístrojem Homelight®	
4.4. Možné vedlejší účinky	
5. Oprava	28
5.1. Možné problémy	
5.2. Zákaznický servis	
6. Recyklace, balení, etiketace	30

1. Bezpečnostní pokyny

POZOR

- Je třeba pozorně si přečíst bezpečnostní pokyny, aby se zabránilo vedlejším nežádoucím účinkům nebo vážnému poškození očí.
- Neošetřujte stejnou oblast více než jednou během jedné aplikace!
- Nevhodné použití přístroje může způsobit vážné poškození kůže.
- Nepoužívejte epilátor na oblasti kolem očí. Přístroj není určen k epilaci obočí nebo řas. Nevhodné použití přístroje může způsobit vážné poškození očí. Chraňte oči během používání.
- Světelná hlavice musí být v kontaktu s pokožkou před vypuštěním impulzního záření. Nikdy nestlačujte spínač, pokud je přístroj Homelight nasměrován do otevřeného prostoru.
- Světelná hlavice se s delším používáním otepluje.
- Konzultujte se svým lékařem či dermatologem:
 - pokud jste užívali fotosenzitivní medikamenty nebo pokud jste v nedávné době použili fotosenzitivní krém či éterický olej.
 - pokud máte sebemenší pochybnosti o rizicích vyplývajících z užití přístroje Homelight.

BEZPEČNOST

- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi, nebo osoby se sníženými schopnostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden dohled nebo jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nepodala instrukce k užívání přístroje. Je nutné dohlédnout na děti, aby si se spotřebičem nehrály.



- **POZOR :** polyethylenové sáčky, které obsahuje produkt nebo jeho obal mohou být nebezpečné. Uchovávejte tyto sáčky mimo dosah dětí a nemluvnat.

- Nesmí se dostat do dětských postýlek, kolébek, kočárků nebo dětských ohrádek. Tenký film sáčku se může přilepit na nos či ústa a znemožnit dýchání. Sáček není hračka.



- **POZOR:** nepoužívat v blízkosti umyvadel, van, sprch nebo dalších nádrží obsahujících vodu. Udržujte přístroj v suchu.
- Používejte pouze originální adaptér.
- Pokud se adaptér nebo napájecí kabel poškodí nebo v případě poruchy přístroje kontaktujte poprodejní servis, aby bylo zabráněno nebezpečí. Nezkoušejte rozebírat a opravovat přístroj sami. Otevřením přístroje byste se vystavili nebezpečným elektronickým součástkám a energii pulsního světla, což může vést k vážným tělesným poškozením a/nebo k nevratným zraněním zraku.
- Uchovávejte adaptér mimo dosah zdrojů tepla.
- Nepoužívejte přístroj, pokud vám upadl nebo vykazuje viditelné známky poškození.
- V případě problémů během používání přístroj okamžitě odpojte.
- Používejte výhradně doplňky, které doporučuje BaByliss.
- Pokud je přístroj zapojený, nenechávejte ho bez dohledu.
- Před očištěním přístroj nejprve vždy odpojte.
- Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neobmotávejte ho kolem přístroje a uklázejte ho vždy bez toho, aby jste ho zkroutili nebo ohýbali.
- Přístroj okamžitě přestaňte používat
 - pokud si všimnete něčeho neobvyklého
 - pokud přístroj vykazuje známky defektu, vydává neobvyklý zvuk či pach
 - pokud se na světelné hlavici objeví praskliny či skvrny
 - pokud je světelná hlavice poškozená
 - když tlačítko VYPNOUT-ZAPNOUT zčervená.
- Neobcházejte bezpečnostní mechanismy přístroje.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v následujících případech:

- Anomálie na kůži v oblasti aplikace: Hnědé nebo černé skvrny na kůži, pihy, pigmentové skvrny, bradavice nebo pigmentové névy.
- Ekzém, lupénka, poškození kůže, otevřené rány nebo progresivní infekce v oblasti aplikace.
- Bílé, šedé nebo blond chloupky v oblasti aplikace
- Těhotenství nebo kojení.
- Tmavá pleť Ošetřování tmavé pokožky epilátorem Homelight může vyvolat vedlejší účinky, např. popáleniny, puchýře či změny barvy pokožky (hyper nebo hypopigmentaci).
- Silné vystavení kůže slunci nebo pobytu v soláriu v průběhu předcházejících 28 dní.
- Tetování nebo trvalý make-upu v oblasti aplikace.
- Dřívější tvoření keloidů, známá citlivost na světlo (nebo fotosenzitivita jako porfyrie, polymorfní reakce na slunce, sluneční kopřivka, lupus, atd.) nebo citlivost na světlo vyvolaná léky, včetně nesteroidních protizánětlivých léků (např.: aspirin, ibuprofen, paracetamol (acetaminofen), tetracyklin, fenothiazin, thiazid, diuretika, sulfonyluera, sulfamid, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, Alfa hydroxid, AHA kyseliny, Beta hydroxy kyseliny (ABH), Retin-A®, Accutane® (isotrenoin, v případě léčby v posledních 6 měsících) nebo topické retinoidy (nebo kyselina azealová).
- Anomálie na kůži způsobené např. diabetes nebo jinými systémickými či metabolickými chorobami.
- Dřívější tvoření oparů v ošetřované oblasti. Takovou oblast lze ošetřit epilátorem Homelight pouze v případě předešlé konzultace s lékařem a užívání preventivní léčby.
- Epilepsie.
- Aktivní implantát, např. kardiostimulátor, implantát léčby inkontinence, inzulinová pumpa, atd.

- Čerstvé očkovaní.
- Dřívější rakovina kůže nebo lokální zhoubné nádory na kůži.
- Radioterapie, chemoterapie či léčba na bázi steroidů v průběhu předcházejících 3 měsíců.
- Jakákoliv jiná dermatologická léčba založená na záření (lazer...).
- Jakýkoliv jiný případ, jež by váš lékař vyhodnotil jako riziko pro aplikování epilace.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nepoužívejte epilátor Homelight k jiným účelům než k epilaci.
- Přístroj nesmí používat děti.
- Před použitím:
 - Ujistěte se, že kůže je čistá (bez stop pletového mléka, make-upu, deodorantu, samoopalovacího krému...)
 - Epilujte oblast určenou k ošetření (kromě obličeje).
- 48 hodin před prvním použitím proveďte test (viz kapitola 3.2 „Provedení testu s přístrojem Homelight“).
- Udržujte povrch světelné hlavice přístroje v čistotě (viz kapitola 4.2. „Čištění“).
- Abyste se vyhnuli vedlejším účinkům:
 - Vyberte takový stupeň výkonu, jaký je doporučován pro váš typ barvy pleti (viz kapitola 2.3. «Skin Sensor System»).
 - Dodržujte frekvenci použití přístroje podle doporučeného rozpisu (viz kapitola 2.4. „Jak si naplánovat ošetření“).
- Jakékoliv nepohodlí přetrvávající po použití přístroje či jakýkoliv vedlejší účinek na vaši kůži konzultujte ošetřujícím lékařem či dermatologem.
- Nepoužívejte přístroj Homelight na opálenou pokožku nebo bezprostředně po vystavení kůže slunečním paprskům!

- Nevystavujte se bez ochrany slunečním paprskům ani UV záření v soláriu

- v období 4 týdnů před ošetřením přístrojem Homelight®
- v období 2 týdnů po ošetření přístrojem Homelight®

"Vystavení se slunečnímu záření" znamená nepřerušené nechráněné vystavení kůže přímým slunečním paprskům po dobu 15 minut nebo nechráněné vystavení kůže nepřímým slunečním paprskům nepřerušeně po dobu jedné hodiny.

- Pokud se vystavíte slunečním paprskům, musíte svou kůži odpovídajícím způsobem chránit buď pomocí oděvu nebo použitím opalovacího krému (s faktorem vyšším než 50). Krém je třeba používat pravidelně 3 týdny před a po ošetření.
- Pokud se objeví popáleniny nebo puchýře, okamžitě aplikaci přerušte!
- Před použitím zakryjte všechna mateřská znaménka, tetování, černé nebo hnědé skvrnky, pihy, bradavice či výrůstky.
- Nepoužívejte na šourek, vaginu, stydké pysky, konečník, bradavky, prsní dorce, vnitřek uší a nosu.
- Nepoužívejte přístroj na žádnou část těla, kde byste si mohli později ochlupení přát.
- Pro čištění pokožky před ošetřením epilátorem Homelight nikdy nepoužívejte hořlavé tekutiny (včetně parfému, dezodorantu nebo jakékoliv jiné směsi obsahující alkohol) či aceton.

SPECIFIKACE

Bod kontaktu	Lampa tělo: 4.0 cm ² Obličejová lampa: 2.0 cm ²
Frekvence opakování	Na stupni 1, impuls každých 1,6 vteřiny Na stupni 5, impuls každých 3,5 vteřiny
Světelná intenzita	Na stupni 1: 2.0 J/cm ² Na stupni 2: 3.0 J/cm ² Na stupni 3: 3.5 J/cm ²

	Na stupni 4: 4.0 J/cm ² Na stupni 5: 4.5 J/cm ²
Vlnová délka	550 - 1200 nm (se speciálním filtrem pro tělo) 600 - 1200 nm (se speciálním filtrem pro obličej)
Požadované elektrické zapojení	100 - 240 VAC, 3.5 A

Dodržujte směrnice k používání

Ochrana proti vlhkosti: běžná

2. Provoz přístroje Homelight®

Homelight® od BaByliss je osobní epilátor, který trvale odstraňuje nežádoucí ochlupení a zabraňuje opětovnému růstu chloupků díky technologii IPL (intenzivní pulzní světlo).

2.1 Technologie IPL

Za pomoci technologie IPL, Homelight® odstraňuje chloupky bezbolestně díky vysílání pulzních paprsků. Pulzní paprsek cílí na pigment, obsažený v chloupku (melanin) až ke kořenu, aby bylo zamezeno opětovnému růstu chloupku. Čím více melaninu chloupek obsahuje (tzn. čím je chloupek tmavší), tím více světla je schopen absorbovat a fotoepilace je účinnější. Technologie IPL je profesionály využívána již 15 let a byla podrobena klinickým výzkumům, které potvrdily její účinnost a neškodnost.


2.2 Fáze růstu chloupku

Fáze růstu chloupku hraje významnou roli v procesu epilace pomocí technologie IPL, kterou využívá Homelight®. Je důležité uvědomit si fungování celého procesu cyklu růstu chloupku, abychom s přístrojem Homelight® dosáhli těch nejlepších výsledků.

Cyklus růstu chloupku se skládá ze tří souvislých fází:

- Anagenní fáze (v této fázi chloupky rostou)
- Katagenní fáze (přechodné období)
- Telogenní fáze (klidová fáze)




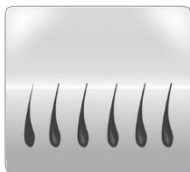


**Před ošetřením přístrojem
Homelight®**




**Během pulzního záření,
které vydává přístroj
Homelight®**

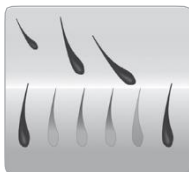


**Po ošetření přístrojem
Homelight®**

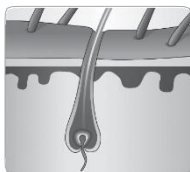

**Fáze růstu chloupku
Anagenní**

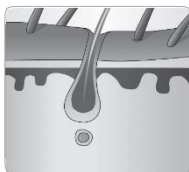

Přechodná fáze Katagenní

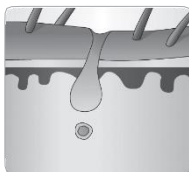

**Fáze odpočinku/spánku
Telogenní**

Celý cyklus růstu chloupku průměrně trvá 18-24 měsíců. Většina chloupků se nachází v jedné ze dvou klidových fází (katagenní nebo telogenní).

Přístroj Homelight® nemá na chloupky v klidové fázi žádný efekt. Naproti tomu je účinný na chloupky ve fázi anagenní. Je tedy třeba epilaci ošetření několikrát zopakovat, aby byl přístroj účinný na všechny chloupky, a aby bylo dosaženo trvalých výsledků.

2.3 Skin Sensor System - automatická detekce úrovně intenzity

Homelight® nabízí pět úrovní intenzity, od nejnižší (úroveň 1), až po nejvyšší (úroveň 5). Stupeň intenzity určuje intenzitu pulzních paprsků aplikovaných na kůži během použití přístroje.

Je tedy důležité správně nastavit úroveň intenzity pro váš odstín pleti. Tmavší pleť, která tedy obsahuje více melaninu snese nižší úroveň

intenzity než pleť světlejší.

Aby vám bylo poskytnuto co nejefektivnější, ale zároveň naprosto bezpečné ošetření, přístroj Homelight® je vybaven funkcí Skin Sensor System. Tento systém automaticky detekuje typ pleti a nastaví správnou intenzitu pulzních paprsků.

Popis různých typů barvy pleti neboli fototypů podle Fitzpatricka

Fototypy	Barva pleti	Charakteristiky	Doporučené úrovně intenzity
I	velmi světlá, bílá pleť	Neopálí se ani při systematickém vystavování slunci	Stupeň 3 ●●●○○
II	světlá pleť	Během častého vystavování slunci se lehce opálí	Stupeň 3 ●●●○⊗
III	krémově světlá pleť	Během příležitostného vystavování slunci se středně opálí	Stupeň 2 ●●○○⊗
IV	Mírně hnědá pleť	Během častého vystavování slunci se snadno opálí	Stupeň 2 ●●○⊗⊗
V	tmavě hnědá pleť	Během občasného vystavování slunci se velmi snadno opálí	Stupeň 1 ●○○⊗⊗
VI	černá pleť		Homelight® se nesmí používat.

●: doporučená úroveň

○: úroveň doporučená, pokud nedošlo k nepohodlí nebo vedlejším účinkům při předchozím ošetření.

⊗: nepovolená úroveň

2.4 Plánování ošetření přístrojem Homelight®

Plánujte epilační ošetření přístrojem Homelight® dopředu!

Doporučuje se řídit se níže uvedeným kalendářem.

- První 4 ošetření epilátorem Homelight® musí být v rozestupu 2 týdnů.
- Další ošetření by měla probíhat v intervalech 4 týdnů (až do dosažení požadovaného výsledku).
- Poté, v případě opětovaného růstu chloupku, budete přístroj Homelight® používat příležitostně, dokud nedosáhnete trvalých výsledků. Je třeba respektovat rozestupy minimálně 4 týdnů mezi jednotlivými ošetřeními.

1. měsíc							2. měsíc							3. měsíc						
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30

4. měsíc							5. měsíc							6. měsíc						
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

Pozor:

- Ošetření té samé oblasti s rozestupem menším než dva týdny nevede k lepším výsledkům a může vyvolat nežádoucí účinky.
- Doporučuje se používat přístroj Homelight® s rozvahou, to znamená neopakovat ošetření neomezeně. Jedna celá kúra (celkem 7-8 jednotlivých ošetření) jednou ročně je dostačující pro dosažení velmi dobrých výsledků.

POZN.: Hormonální faktory a fyziologické změny mohou přivést váčky z

fáze odpočinku do aktivní fáze. Udržující epilace přístrojem Homelight® mohou být prováděny (v časových odstupech alespoň 4 týdnů).

2.5 Délka jednoho ošetření přístrojem Homelight®

Ošetřovaná zóna	Průměrná délka ošetření	Použitá funkce
Částečná epilace nohou	8 až 10 minut	Funkce Gliss
Celá noha	15 minut	Funkce Gliss
Záda	5 minut	Funkce Gliss
Hrudník	5 minut	Funkce Gliss
Oblast bikin	2 minuty	Funkce précision
Podpaží	1 minuta	Funkce précision

POZN.: *Jednotlivé funkce (gliss a précision) jsou dále vysvětleny v odstavci 4.1.*

2.6 Očekávané výsledky epilace pomocí přístroje Homelight®

Účinnost přístroje Homelight® se může měnit:

- dle jednotlivých osob,
- v závislosti na ošetřované oblasti,
- v závislosti na barvě chloupků.

Pozor: Přístroj Homelight® neúčinkuje na bílé, šedivé a světlé chloupky. Bílé, šedivé nebo světlé chloupky neobsahují mnoho melaninu a ošetření pomocí pulzního záření na ně tedy dostatečně nepůsobí.

POZN.:

- Často se stává, že chloupky vypadají, jakoby pokračovaly v růstu

jeden až dva týdny po aplikaci přístrojem Homelight® (fenomén vyražení chloupku). Po dvou týdnech si všimnete, že tyto chloupky vypadly nebo se odpojily od svého váčku. Nedoporučuje se pokoušet se chloupky vytrhávat. Nechte chloupky vypadnout samovolně.

- *Je možné, že po ošetření epilátorem Homelight® některé chloupky porostou jemnější a světlejší. Kosmetičky a lékaři, kteří užívají přístroje k epilaci pulzním světlem tento fenomén zaznamenali.*

2.7 Zařízení k ochraně očí

Díky zabudovanému zařízení k ochraně očí přístroj Homelight® uvolňuje pulzní záření pouze přes světelnou hlavici, která je v úplném kontaktu s pokožkou.

2.8 Popis přístroje Homelight®

1. Spínač
2. Lampa na tělo
3. Lampa na obličej
4. Světelná hlavice
5. Tlačítko ON/OFF
6. Nastavení intenzity
7. Kontrolka indikátoru stupně intenzity
8. Kontrolka READY
9. Vodítko pro nastavení intenzity
10. Skin Sensor System

3. Použití přístroje Homelight®

3.1. Příprava pokožky

Tělo

Před použitím přístroje Homelight® na tělo musí být vaše pokožka oholená (24 hodin dopředu), čistá, suchá a bez zbytků pudru či deodorantu. Pozor: neprovádějte epilaci (za pomoci elektrického epilátoru, pinzety nebo vosku) před použitím přístroje Homelight®. Po epilaci (vytržení chloupku i s kořínkem) by byla epilace pulsním světlem neúčinná.



Obličej

Jednotlivé části obličeje před aplikací nehojte. Před použitím přístroje Homelight® na obličej, odstraňte veškeré zbytky krému, čistícího mléka a make-upu.

Pozor: neprovádějte epilaci (za pomoci elektrického epilátoru, pinzety nebo vosku) před použitím přístroje Homelight®. Po epilaci (vytržení chloupku i s kořínkem) by byla epilace pulsním světlem neúčinná.



3.2 Provedení testu s přístrojem Homelight®

48 hodin před prvním použitím je třeba provést test přístrojem Homelight®

1. Zapojte napájecí kabel adaptéru do zástrčky přístroje Homelight®

- (je umístěna na rukojeti přístroje) (OBR. 1 - viz obal).
2. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické zásuvky.
> Kontrolka ON/OFF začne svítit oranžově. (OBR. 2).
 3. Zapněte přístroj pomocí kontrolky ON-OFF (OBR. 3).
> tlačítko ON/OFF zezelená.
> kontrolka stupně intenzity 1 svítí Úroveň 1 je automaticky naprogramovaná jako výchozí při zapnutí přístroje. (OBR. 4).
 4. Umístěte Skin Sensor přístroje na oblast, kde chcete provést test (doporučujeme provést test v oblasti nohou) (OBR. 5)
> Světelná/é kontrolka/y úrovně intenzity se rozsvítí a blikají, což je znamená, že přístroj úspěšně určil fototyp oblasti kůže určené k epilaci, a že automaticky přizpůsobil úroveň energie (OBR. 6).
- POZN.: pokud přístroj určí fototyp VI (černá pleť), kontrolka ON/OFF na sekundu zčervená a upozorní tak, že použití přístroje se nedoporučuje.
5. Stiskněte spínač pro potvrzení (OBR. 7)
> Světelná/é kontrolka/y úrovně intenzity přestává/jí blikat (OBR. 8).
 6. Umístěte světelnou hlavici na detekovanou oblast kůže a držte přístroj pevně na svém místě, aby byl úplně v kontaktu s kůží.
> Světelná kontrolka Ready bliká pokud je přístroj správně umístěn na kůži a pokud je připraven uvolnit pulzní záření (OBR. 9)
 7. Stiskněte spínač, ke spuštění pulzního záření na kůži. (OBR. 10).

POZN.: Můžete cítit jemné teplo a mravenčení.

8. Přesuňte světelnou hlavici na další oblast kůže a stiskněte spínač, který spustí další pulzní záření. Dejte pozor, aby jste nevrstvlili více pulzních záření na sebe.

Pokud si nevšimnete žádných abnormálních reakcí nebo nepohodlí (OBR. 11), po 48 hodinách od provedení testu, můžete začít s ošetřováním a přejít na kapitolu „Ošetření přístrojem Homelight®“.

Pokud vaše kůže na test nereaguje dobře (OBR. 12), pokud

zaznamenáte abnormální reakce nebo nepohodlí po 48 hodinách, proveďte druhý test na stupni intenzity 1, ať už je váš fototyp jakýkoliv, bez ohledu na Skin Sensor, a vyčkejte dalších 48 hodin. **(OBR. 13-14-15)**

- Pokud na druhý test reagujete dobře, proveďte první ošetření stupněm intenzity 1, který vyberete manuálně.
- Pokud vaše kůže nereaguje dobře ani na tento druhý test, doporučuje se přístroj nepoužívat.

Pokud se neprojeví žádné abnormální reakce, vedlejší účinky nebo nepohodlí, můžete postupně zvyšovat stupeň intenzity podle dalších vyšetření v souladu se schématem uvedeným níže nebo za pomoci vodítka k výběru intenzity.

- Fototyp I :	● ● ● ○ ○	
- Fototyp II :	● ● ● ○ ⊗	
- Fototyp III :	● ● ○ ○ ⊗	
- Fototyp IV :	● ● ○ ⊗ ⊗	
- Fototyp V :	● ○ ○ ⊗ ⊗	

3.3 Ošetření přístrojem Homelight®

Doporučuje se vždy používat Skin Sensor na kůži před každou epilací a při každé změně zóny aplikace.

1. Zapojte napájecí kabel adaptéru do zástrčky přístroje Homelight® (je umístěna na rukojeti přístroje) **1).**
2. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické zásuvky.
> Kontrolka ON/OFF začne svítit oranžově. **(OBR. 2).**
3. Zapněte přístroj pomocí kontrolky ON-OFF **(OBR. 3).**
> tlačítko ON/OFF zezelená.
> kontrolka stupně intenzity 1 svítí Úroveň 1 je automaticky naprogramovaná jako výchozí při zapnutí přístroje. **(OBR. 4).**
4. Umístěte Skin Sensor přístroje na oblast kůže, kde chcete provést

ošetření **(OBR. 16)**

> Světelná/é kontrolka/y úrovně intenzity se rozsvítí a blikají , což je znamená, že přístroj úspěšně určil fototyp oblasti kůže určené k epilaci, a že automaticky přizpůsobil úroveň energie **(OBR. 17)**

5. Stiskněte spínač pro potvrzení (OBR. 18)

> Světelná/é kontrolka/y úrovně intenzity přestává/jí blikat **(OBR. 19).**

6. Umístěte světelnou hlavici na detekovanou oblast kůže a držte přístroj pevně na svém místě, aby byl v úplném kontaktu s kůží.

> Světelná kontrolka Ready bliká pokud je přístroj správně umístěn na kůži a pokud je připraven uvolnit pulzní záření **(OBR. 20)**

7. Stiskněte spínač, který vypustí pulzní záření na kůži. (OBR. 21)

POZN.: Můžete cítit jemné teplo a mravenčení.

8. Přesuňte světelnou hlavici na další oblast kůže a stiskněte spínač, který spustí další pulzní záření. Dejte pozor, aby jste nevrstvlí více pulzních záření na sebe.

Manuálně zvýšit stupeň intenzity pro dosažení větší účinnosti můžete pouze v případě, že se po předchozí aplikaci neobjevily žádné vedlejší účinky nebo nepohodlí.

Pokud pocítíte jakékoliv nepohodlí, přejděte na nižší stupeň intenzity.

POZN.: Pokud dojde ručně k nastavení stupně intenzity, který se nedoporučuje kvůli barvě kůže determinované Skin Senzorem, světelná kontrolka stupně intenzity třikrát zabliká, pro upozornění na nedoporučený stupeň intenzity. Doporučuje se tedy ručně snížit stupeň intenzity, aby bylo dosaženo odpovídající intenzity.

3.4 Funkce

Homelight® vám nabízí dvě základní funkce Funkce précision a funkce

A. Funkce précision



Funkce précision umožňuje bezpečné ošetření těch nejcitlivějších a špatně přístupných oblastí vašeho těla (obličej, podpaží, oblast bikin...)

Pro ošetření obličeje, umístěte speciální lampu určenou k ošetření obličeje na hlavici přístroje a postupujte podle pokynů popsanych v kapitole o epilaci obličeje přístrojem Homelight®.

Postup:

Viz kroky 1 - 8 v kapitole 3.3 „Ošetření přístrojem Homelight®“

B. Funkce Gliss



S nastavením funkce Gliss se pulzní záření uvolňuje automaticky, nepřetržitě bez dalšího ovládání (36 pulzních paprsků za minutu na úrovni 1).

Postup:


1. Pro aktivaci funkce gliss, proveďte kroky 1 - 6 z kapitoly 3.3. „Ošetření přístrojem Homelight®“ Poté správně přiložte světelnou hlavici přístroje Homelight® na kůži a spínač stále držte stisknutý.
2. Můžete tedy s přístrojem jednoduše klouzat po kůži, nepřerušovaně, pomalým pohybem, bez snímání přístroje z kůže a opětného přikládání na další místo.

POZN.:

- *Pokud zvednete přístroj z kůže a stále držíte spínač, funkce gliss zůstává aktivní. Pro vaši bezpečnost je ale impuls vysílán pouze tehdy, když je přístroj v celkovém kontaktu s kůží. Dohlédněte na to, aby byla světelná hlavice přístroje Homelight® v celkovém kontaktu s kůží, aby mohla správně fungovat funkce gliss.*
- *V opačném případě máte 5 vteřin na správné přiložení přístroje na kůži. Spínač držíte stále spuštěný. Pokud není kontakt s kůží úplný, funkce Gliss bude po uplynutí 5 vteřin vypnuta. Spínač musíte pustit a poté znovu stisknout, abyste mohli v procesu pokračovat.*
- *Pokud zvednete přístroj z kůže a zároveň pustíte spínač, funkce Gliss se vypne.*

Funkce Gliss je určena těm, kteří už mají určité zkušenosti a jistou zručnost v používání přístroje. Se 36 impulzy za minutu (na stupni 1) umožňuje funkce Gliss rychlé a důkladné ošetření větších ploch těla: nohy, záda, paže, hrud'. Pro citlivější oblasti a tvář používejte funkci Precision.

3.5 Pokrytí oblasti aplikace

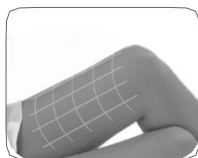

Pro správné pokrytí celé plochy aplikace je třeba provádět ošetření v pruzích, od jednoho konce ke druhému, systematicky, plochu vedle plochy. Vyhněte se tak vedlejším účinkům způsobeným překrýváním ošetřených oblastí.

Stopy po přitlačení světelné hlavice na vaši kůži vám pomohou správně hlavici umístit pro další impuls. Vyhněte se tak překrývání ošetřených oblastí či vynechávání prostorů mezi nimi.

3.6 Epilace obličeje přístrojem Homelight®

Epilace obličeje vyžaduje zvýšenou pozornost; kůže obličeje je mimořádně jemná a citlivá. Z tohoto důvodu je přístroj Homelight® vybaven speciální světelnou hlavicí určenou k ošetření obličeje. Speciální světelná hlavice určená k ošetření obličeje je zacílená a velmi přesná a upravuje světelné spektrum tak, aby odpovídalo citlivosti pokožky obličeje.

Bezpečnostní pokyny k epilaci obličeje:



- **Jednotlivé části obličeje před aplikací neholte.**
- Používejte výhradně světelnou hlavici přístroje Homelight® určenou k ošetřování obličeje.
- Homelight® slouží pouze k epilaci spodních částí obličeje (tváře, horní ret a brada).
- Nepoužívejte přístroj Homelight® k epilaci řas, vlasů a obočí.
- Používejte přiložené ochranné brýle během ošetření epilátorem Homelight®.
- Během pulzního záření se nedívejte na ošetřovanou oblast.
- Nepoužívejte Homelight® k ošetření oblasti kolem očí.
- Výrobek není určen k péči o pánské vousy.
- Pro vaše pohodlí a bezpečnost doporučujeme během prvních ošetření tváře epilátorem Homelight® asistenci další osoby.
- Nepoužívejte funkci Gliss pro epilaci obličeje.
- Je nezbytné vyčkat pět sekund mezi jednotlivými pulzními paprsky, při použití na obličeji. Délka epilace obličeje přístrojem Homelight® nesmí překročit 10 minut.

Nasazení speciální světelné hlavice na obličej

Při nasazení či odejmutí speciální světelné hlavice na obličej musí být přístroj vypnutý a odpojený.

Pro nasazení nebo sejmутí opatrně uchopte světelnou hlavici určenou k epilaci obličeje mezi palec a ukazováček.

POZN.: Odejměte speciální světelnou hlavici určenou pro ošetření obličeje a nasadte speciální světelnou hlavici určenou na tělo, pro ošetření nohou, zad nebo rukou.

Pozor, horký povrch. Nedotýkejte se světelné hlavice určené pro ošetření obličeje prsty.

4. Po použití přístroje Homelight®

4.1 Vypnout přístroj Homelight®

Po skončení epilace vypněte přístroj Homelight® pomocí tlačítka ON/OFF.

Vypojte adaptér ze síťové zásuvky.

POZN.: Pokud není přístroj Homelight® používán více než 10 minut, automaticky se vypne. Kontrolka ON/OFF začne svítit oranžově. Pro opětovné používání přístroje je třeba stisknout tlačítko ON/OFF a nastavit přístroj na zvolený stupeň intenzity.

4.2 Čištění

Doporučujeme vám vyčistit epilátor Homelight® a zejména světelnou hlavici po skončení každého ošetření.

- Odpojte Homelight® a před očištěním nechte přístroj a především světelnou hlavici několik minut vychladnout.

- Jemně očistěte povrch přístroje a zejména povrch světelné hlavice čistým suchým hadříkem a pomocí čistícího prostředku určeného k čištění elektronických přístrojů.
- Po očištění uložte Homelight® do originální krabice na suché a bezpečné místo.

4.3 Péče o pokožku po epilaci přístrojem Homelight®

Nevystavujte oblasti ošetřené přístrojem Homelight® slunci bez ochrany během dvou týdnů od aplikace. Chraňte svou pleť opalovacím krémem (s ochranným filtrem vyšším než 50) nebo oblečením, které bude zakrývat celou ošetřovanou plochu, během celého cyklu ošetření a min. dva týdny po poslední epilaci přístrojem Homelight®.

Na ošetřená místa nepoužívejte parfémovaný krém ani deodorant.

4.4 Možné vedlejší účinky

Vedlejší účinky a komplikace se vyskytují jen zcela výjimečně, pokud je Homelight® používán podle instrukcí popsanych v tomto návodu k použití.

Je normální cítit mírné nepohodlí po provedení epilace přístrojem Homelight®.

Jakákoliv kosmetická ošetření včetně těch, která jsou určena k domácímu užití, s sebou nicméně nesou jistá rizika.

V případě překrývání ošetřovaných míst nebo opakované aplikaci pulzního záření na jedno místo můžete pocítit nebo zaregistrovat:

- **Citlivost kůže a lehce nepříjemný pocit** Ačkoliv je epilace pulsním světlem používaná doma obecně velmi dobře snášena, většina lidí mívá během aplikace lehce nepříjemné pocity, často popisované jako mravenčení v místě aplikace. Tento pocit trvá většinou jen během aplikace či po dobu několika následujících minut. Jakýkoliv jiný nepříjemný pocit není normální a znamená, že musíte buď s aplikací přestat, protože ji vaše tělo špatně snáší, nebo že zvolená intenzita je příliš vysoká.

- **Zarudnutí:** Vaše kůže může zarudnout bezprostředně po použití epilátoru Homelight® nebo během následujících 24 hodin. Zarudnutí většinou do 24 hodin zmizí. Pokud přetrvává více než 2 - 3 dny, obraťte se na svého lékaře.
- **Přecitlivělost pokožky** Pokožka je v oblasti aplikace citlivější, může vysychat a loupat se.
- **Popáleniny nebo poranění:** velmi zřídka se po aplikaci objeví na kůži poranění či popáleniny. Zahojení trvá i několik týdnů a ve výjimečných případech může zůstat jizva.
- **Jizva:** ačkoliv jsou tyto případy velmi vzácné, mohou se objevit i trvalé jizvy. Jizva má většinou bělavé zabarvení (hypertrofické) a vypadá jako povrchové poranění. Může nicméně být i široká a červená (hypertrofická) nebo široká a vycházející mimo zasaženou oblast (keloid). Ke zlepšení vzhledu mohou být použity pokročilé estetické zákroky.
- **Změna pigmentace** Působení přístroje Homelight® míří na kořínky chloupku, přesněji na pigmentové buňky kořínku. Může se nicméně objevit dočasná hyperpigmentace (zvýšení pigmentace nebo hnědé zbarvení) či hypopigmentace (vyblednutí) okolní pokožky. Riziko změny pigmentace je vyšší u osob s tmavou pletí. Obecně řečeno jsou změny pigmentace a zabarvení dočasné. Případy trvalé hyperpigmentace a hypopigmentace jsou vzácné.
- **Nadměrné zarudnutí pokožky nebo otok/napuchnutí:** ve výjimečných případech může pokožka v oblasti aplikace zarudnout nebo napuchnout. Tyto reakce jsou častější na citlivých oblastech těla. Zarudnutí a otok by měly zmizet během 2 - 7 dní. Během této doby doporučujeme pravidelně přikládat led. Jemné očištění neškodí, ale musíte se vyhnout jakémukoliv vystavování kůže slunečnímu záření.

- **Infekce:** Kožní infekce se vyskytuje velmi vzácně, ale může se objevit po popálenině nebo poškození kůže vyvolaném epilátorem Homelight®.
- **Modřiny:** Velmi zřídka může použití epilátoru Homelight® způsobit modře zabarvenou podlitinu přetrvávající 5 - 10 dní. Během hojení modřiny se může pokožka zabarvit do rezavého odstínu (hyperpigmentace), což může být i trvalé.

V případě přetrvávajících obtíží či nepříjemných pocitů během či po ošetření přístrojem Homelight® se obraťte na svého lékaře.

5. Oprava

5.1 Možné problémy

Homelight® se nezapne

Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen k vašemu epilátoru Homelight® a zapojen do elektrické zásuvky.

Když stisknu spínač, nevychází impuls

- Ujistěte se, že je světelná hlavice v úplném kontaktu s kůží, a že světelná kontrolka READY bliká.
- Přesvědčte se, že kontrolka READY svítí.
 - > Pokud se kontrolka nerozsvítí ani po 10 vteřinách, vypněte a znovu zapněte epilátor Homelight® stisknutím tlačítka ON/OFF dvakrát po sobě.
 - > Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznický servis BaByliss.
- Přesvědčte se, že je tlačítko ON/OFF zapnuté.
 - > Pokud kontrolka ON/OFF svítí, vypněte a znovu zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF.
 - > Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznický servis BaByliss.
- Kontrolka ON/OFF bliká červeně
 - > Ujistěte se, že světelná hlavice (obličejová nebo tělová) je správně umístěna na hlavici přístroje.
 - > Pokud problém přetrvává: Přístroj se přepnul do bezpečnostního modu, protože zaznamenal přehřátí nebo vážnou poruchu (rozbitý ventilátor, problém s kondenzátorem...). Vypněte přístroj. Nechte jej 15 minut zchladnout a pak jej znovu zapněte.
 - > Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznický servis BaByliss.

- Kontrolka ON/OFF bliká střídavě zeleně a červeně.
 - > Adaptér, který používáte pro připojení vašeho přístroje Homelight® k elektrické síti je jiný, než ten, který byl dodán s epilátorem nebo je poškozen.
 - > Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznický servis BaByliss.
- Kontrolka ON/OFF svítí červeně
 - > Přístroj je u konce své životnosti.

5.2 Zákaznický servis

Více informací o produktech Homelight® získáte na:
www.babyliss.com.

Pokud je váš přístroj rozbitý, poškozený, vyžaduje opravu či potřebujete jakoukoliv pomoc, obraťte se na zákaznický servis firmy BaByliss.

6. Recyklace, balení, etiketace



ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ PO SKONČENÍ SVÉ ŽIVOTNOSTI

Je v zájmu všech aktivně se podílet na společné snaze o ochranu životního prostředí, proto:

- Nevyhazujte přístroje do směsného odpadu.
- Využijte systému zpětného odběru a sběrných dvorů, který by měl být ve vaší zemi k dispozici.

Některé materiály mohou takto být recyklovány a znovu zhodnoceny. Přístroj není určen k používání spolu s anestetickou hořlavou směsí, se vzduchem, kyslíkem nebo kysličníkem dusitým.